


Bedienungsanleitung



Mini Massage Gun

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

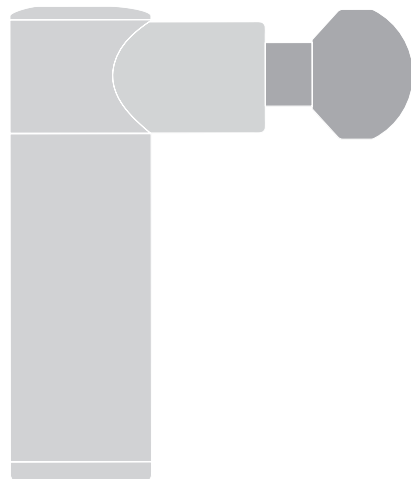

Reserve 20200327001

- Unsere Marke behält sich vor, das Produkt und die Anleitung weiter zu verbessern. Dies beinhaltet auch das äußerliche Erscheinungsbild und die Materialien der Herstellung.
- Die Anleitung wurde genau geprüft, es können aber Druckfehler oder Übersetzungsfehler vorkommen. Bitte verstehen Sie, dass die Marke sich für den Fall das Recht der freien Interpretation vorbehält.

Fehlerhafte Entsorgung verschmutzt die Umwelt!

Gewährleistungs-Karte

Gerätenr: _____

Kaufdatum: _____

Gerätenr: _____

Name des Kunden: _____

Telefonnr. Des Kunden: _____

E-Mail Adresse des Kunden: _____

Die gesetzlichen Gewährleistung verfällt, sollten folgende Punkte eintreffen:

- Bei Verlust der Gewährleistungs-Karte oder des Einkaufsbeleges
- Bei Schäden die durch Menschenhand entstanden sind oder durch jahrelange Abnutzung
- Abruptes Beenden des Motors mit Folgeschäden
- Die Marke behält sich das Recht der finalen Interpretation über die „After-Sales“ Bedingungen und anderen Einschränkungen vor.

Kontakt: Tamia Warenhandels GmbH
Stenzelring 33,21107 Hamburg
Tel.: +49(0)40-31974918
Fax: +49(0)40-30236496



Entsorgung


Bitte entsorgen Sie dieses Gerät nicht über den Hausmüll/Restmüll. Es handelt sich bei dem Gerät um ein Elektro- bzw. Elektronikgerät.

Elektroaltgeräte und Altbatterien (bzw. Akkus) können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung die Umwelt oder die Gesundheit schädigen können. Batterien und Akkus enthalten zudem wichtige Rohstoffe (z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel) und werden wieder verwendet. Eine Entsorgung von Elektro- bzw. Elektronikgeräten, Batterien und Akkus darf nicht über den Restmüll erfolgen.

Leere Batterien und Akkus oder Produkte, in denen leere Batterien oder Akkus verbaut sind, müssen bei sogenannten Recyclinghöfen bzw. Sammelsysteme abgegeben werden. Dies gilt auch für Elektro- und Elektronikgeräte. Erkundigen Sie sich im Zweifel bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über die sach- und umweltgerechte Entsorgung.

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle (z.B. Recyclinghof) abzugeben.

Elektro- und Elektronikgeräte, sowie schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem Symbol eines durchgestrichenen Mülleimers gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist:

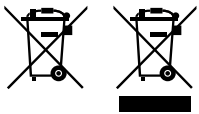

Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind:

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium,

Hg = Quecksilber Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent,

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei.

Bitte denken Sie daran, Ihre Daten zu löschen. Hierfür sind Sie selbst verantwortlich.

Elektro- und Elektronikgeräte werden kostenlos angenommen und einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Unsere Rücknahmeverpflichtung beschränkt sich dabei auf Altbatterien (bzw. Akkus) der Art, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben, sowie auf die Menge, derer sich Endnutzer üblicherweise entledigen. Kosten für eine eventuelle Rücksendung werden von Tamia nicht übernommen.

Altgeräte nehmen wir gerne entgegen und entsorgen diese kostenlos für Sie.

Altgeräte nehmen wir gerne entgegen und entsorgen diese kostenlos für Sie.

Kontakt:


Tamia Warenhandels GmbH

Stenzelring 33

21107 Hamburg

Tel.: +49(0)40-31974918

Fax: +49(0)40-30236496

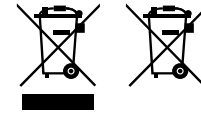


Bedeutung durchgestrichener Mülleimer:

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierte Abfallentsorgung, verwenden Sie separate Sammelanlagen.

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Regierung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten.


Wenn Elektrogeräte in Deponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen und Gesundheit und Wohlbefinden schädigen.

Der Händler ist gesetzlich verpflichtet Ihr altes Gerät kostenlos zurückzunehmen.

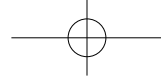

Bitte beachten Sie vor der Erstnutzung Folgendes:

- Laden Sie vor der 1. Benutzung die Batterie komplett voll (bis zu 6 Stunden).
- Um es aufzuladen, verbinden Sie den „Typ-C Adapter“ mit dem Auflade-Slot des Gerätes, der Adapter wird mit der 100-240V Steckdose verbunden.
- Schalten Sie das Gerät während des Ladeprozesses nicht an.

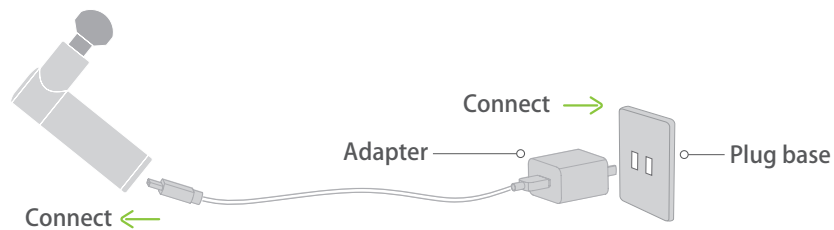

- △ Es ist Überstrom-, Überladungs- und Überhitzungsschutz im Handlauf verbaut. Der Akku kann nur begrenzt geladen werden, sollte die Temperatur unter 0°C fallen.
- Bitte halten Sie die Batterie immer etwas geladen. Das Verlängert die Lebensdauer des Akkus ungemein.
- Bitte benutzen Sie das Ladekabel nur ohne äußerliche Schäden. Berühren Sie die Steckverbindung nicht mit nassen Händen.
- Während des Ladeprozesses blinkt eine Leuchte. Ist das Aufladen beendet sind 4 Leuchten zu sehen.

Wie wird es benutzt:

- Drücken Sie 2 Sekunden den Home Button um das Gerät anzuschalten
- Drücken Sie 2 Sekunden den Home Button um das Gerät abzuschalten


- △ Kommen Sie mit den Aufsätzen nicht in die Nähe Ihres Gesichtes, während das Gerät läuft.

Nach der Benutzung:

- Drücken Sie die Home Taste etwas länger, um das Gerät komplett auszuschalten.
- Bewahren Sie das Equipment sicher auf, um es vor eventuellen Schäden zu bewahren
- △ Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz verbaut. Wenn es überhitzt, schaltet es sich automatisch ab, um abzukühlen.

Produktbeschreibung und Funktion

Bedienansicht

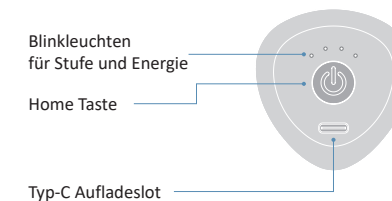

Beschreibung des Bedienfeldes

⊕ Home Button

1. Automatischer Modus:

Drücken Sie 2 Sekunden die Home Taste, um zu dem 1. Programm zu gelangen. Sobald der Druck durch den Benutzer zunimmt, reagiert das Gerät auf diesen und gibt ebenfalls mehr Leistung frei. So sollen auch die tief liegenden Muskelgruppen gut erreicht und angesprochen werden.

2. Manueller Modus:

Durch erneutes Betätigen der Home Taste, gelangen Sie zur 2. Stufe (oder zum 2. Programm). Die höchste Stufe ist die 4. Stufe. Wenn Sie bei dieser Stufe angelangt sind, schalten Sie das Gerät durch erneutes Drücken der Home Taste aus.

Blinkanzeige für die Energie


Die blinkende Leuchte zeigt an, dass sich die Batterie noch im Lademodus befindet und wie weit die Batterie geladen ist. Sobald die Batterie vollgeladen ist, sind alle 4 Leuchten dauerhaft zu sehen.

Blinkanzeige für die Stufe


Während der Benutzung zeigt die Blinkleuchte die aktuelle Stufe an. Bei 1 blinkenden Leuchte befinden Sie sich in dem automatischen Modus bzw. Stufe 1, bei 2 blinkenden Leuchten befinden Sie sich in Stufe 2, bei 3 blinkenden Leuchten in Stufe 3 und bei 4 blinkenden Leuchte in Stufe 4. Von links nach rechts.

TYP-C Aufladegerät

Unterstützt 5V/2A TYP-C Schnell-Ladung

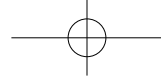

Produktkonstruktion

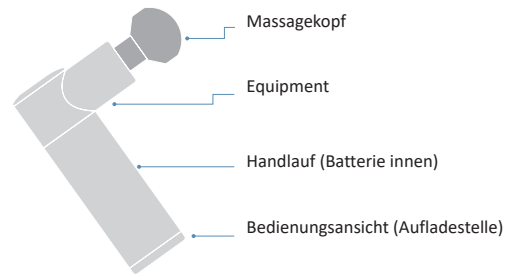

Die unterschiedlichen Aufsätze



Kugelkopf

geeignet für die Muskeln



Spitzkopf

Geeignet für die Gelenke



Flachkopf

Geeignet für alle Bereiche des Körpers


⚠ • Legen Sie keine schweren Dinge auf das Gerät, so vermeiden Sie Beschädigungen

- Sitzen oder Stehen Sie zu keiner Zeit auf dem Gerät
- Halten Sie das Gerät vor Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden

⚠ • Die vorgegebene Nutzungsdauer sollte 10 Minuten nicht überschreiten. Wenn Sie es länger benutzen möchten, müssen Sie eine kleine Pause einbauen.

- Bitte schalten Sie nicht zu schnell zwischen AN und AUS. Warten Sie 3 Sekunden bevor Sie das Gerät wieder Anschalten möchten.
- Bitte passen Sie immer auf Ihre Finger, Haare und alle anderen Teile Ihres Körpers auf, wenn Sie sich in der Nähe des Aufsatzhalters befinden. So können Sie unnötige Vorkommnisse und Unfälle einfach vermeiden.
- Nur für Erwachsene geeignet.
- Halten Sie das Gerät und das Bedienfeld trocken.
- Ziehen Sie nicht am Ladekabel oder am Gerät, während dieses aufgeladen wird.

Den Aufsatz wechseln

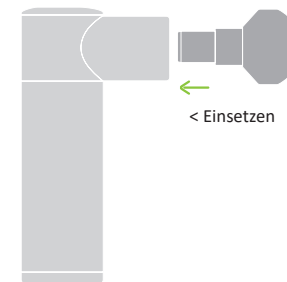

Berühren Sie das Gerät nicht am Aufsatzhalter, vor allem nicht, während dieses in Benutzung ist.



Berühren Sie auch den Aufsatz nicht, während das Gerät in Benutzung ist.

Montieren oder Demontieren Sie die Aufsätze am Gerät immer vorsichtig mit einer Rotationsbewegung (wie auf dem Bild zu sehen).

- ⚠ • Um dieses Produkt sicher nutzen zu können, prüfen Sie bitte vor der Benutzung ob der Massage Aufsatz richtig aufgelegt ist. Es wird empfohlen, mit der leichtesten Stufe zu beginnen und sich Schritt für Schritt zu steigern.
- Bitte Schalten Sie das Gerät zuerst aus, bevor Sie den Massage Aufsatz demontieren